

TOMMASI LABORATÓRIO

Instrução de Trabalho

Coleta de Amostras para exames de DNA

Código:
ITA 005

Versão:
1.0

Página:
1 de 17

1. SITUAÇÃO DE REVISÃO:

Versão	Data	Alteração
1.0	30/07/2012	Formatação, Revisão e Validação

2. OBJETIVO:

Estabelecer as instruções pormenorizadas para a coleta de material para exames de DNA no **TOMMASI LABORATÓRIO**, de modo a possibilitar uma coleta dentro das normas internacionais e com a qualidade necessária para obtenção de amostras específicas para os exames.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO:

- 3.1. Diretoria
- 3.2. Unidade da Garantia da Qualidade
- 3.3. Unidades de negócios ambulatoriais
- 3.4. Secretaria

4. REFERÊNCIA: N.A

5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÕES E SIMBOLOS:

- 5.1. **Exame:** É o conjunto de procedimentos pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos realizados nos pacientes e/ou em suas amostras e aplicados a saúde humana.
- 5.2. **Cadastro do Paciente:** É o conjunto de dados que identifica o paciente, suas amostras e os exames a serem realizados.
- 5.3. **PCR:** Reação em cadeia da polimerase
- 5.4. **DNA:** Ácido desoxirribonucleico
- 5.5. **Swab sem meio de transporte:** Haste com ponta de algodão que sirva para coleta de materiais diversos.
- 5.6. **Teste de paternidade:** Análise do DNA para confirmação de paternidade.
- 5.7. **Teste de maternidade:** Análise do DNA para confirmação de maternidade.
- 5.8. **Material:** Sangue (Tubo de coleta de sangue total em EDTA) ou Células Bucais (Swab)
- 5.9. **Amostra:** porção (ões) do material destinado (s) ao exame.

Elaboração	Nome: Fabrício Martins	Aprovação e Liberação	Nome: Henrique Tommasi Netto
	Cargo: Téc. De Nível Superior III – Biólogo Molecular		Cargo: Diretor Geral
	Data: 30/07/2012		Data: 30/07/2012
	Assinatura:		Assinatura:

Henrique Tommasi Netto
"An. Clínicas Ltda."
CGC 28.133.312/0001-92 - CRF 018/111

 TOMMASI LABORATÓRIO	<h1 style="text-align: center;">TOMMASI LABORATÓRIO</h1> <h2 style="text-align: center;">Instrução de Trabalho</h2> <h3 style="text-align: center;">Coleta de Amostras para exames</h3> <h3 style="text-align: center;">de DNA</h3>	Código: ITA 005 Versão: 1.0 Página: 2 de 17
--	---	---

6. DESCRIÇÃO:

6.1. Teste TRIO = Suposto Pai (SP) x Suposto Filho(a) (SF) x Mãe (M):

Documentos Necessários:

- Cópia e Original da Carteira de Identidade (ID) e CPF ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
- Cópia e Original da Certidão de Nascimento para o suposto filho(a) se o mesmo não tiver ID ou CNH;
- Cópia e Original da Certidão de Nascido Vivo para o suposto filho(a) se o mesmo for recém nascido e não possuir certidão de nascimento.

- 1) Comparar e conferir se as cópias dos documentos estão iguais aos documentos originais;
- 2) Reter as cópias dos documentos.

Ficha de Cadastro:

- 1) Preencher corretamente a **Ficha de Cadastro** com letra legível;
- 2) Cada parte envolvida deverá assinar a sua respectiva **Ficha de Cadastro**;
- 3) Conferir as assinaturas das partes envolvidas na **Ficha de Cadastro**, *pois a mesma deverá ser igual a do documento apresentado*;
- 4) O Responsável pelo preenchimento da ficha deverá assinar o nome legível na **Ficha de Cadastro** no campo “Responsável pelo preenchimento dos dados”.

Suposto Filho Menor de Idade:

- O Responsável legal que assinará a sua **Ficha de Cadastro**;
- Deverá ser preenchido corretamente e com letra legível o **Termo de Autorização para Realização de Exame** e assinado pelo responsável legal, onde o mesmo autorizará a coleta do material biológico (Sangue total ou Células bucais) do suposto filho(a);
- Conferir as assinaturas das partes envolvidas no **Termo de Autorização para Realização de Exame**, *pois a mesma deverá ser igual a do documento apresentado*.

OBS: Todas as partes (Suposto Pai, Suposto Filho(a) e Mãe) quando **MENORES DE IDADE** deverão ter **Ficha de Cadastro e Autorização para Realização de Exame** assinada pelo respectivo Responsável Legal que deverá estar presente na hora da coleta com cópia e original dos documentos necessários (ID e CPF ou CNH).

Solicitação de Entrega de Laudo a outra Pessoa

Será preenchida quando as partes envolvidas solicitarem que o laudo seja entregue a outra pessoa:

- 1) Preencher corretamente o **Termo de Solicitação de Entrega de Laudo a outra Pessoa** com letra legível;
- 2) Parte envolvida que solicitar a entrega do laudo a outra pessoa deverá assinar o **Termo de Solicitação de Entrega de Laudo a outra Pessoa**;
- 3) Conferir a assinatura do **Termo de Solicitação de Entrega de Laudo a outra Pessoa**, *pois a mesma deverá ser igual a do documento apresentado*.

Coleta:

- Explicar o teste para as partes envolvidas;
- Tirar uma foto individual de cada parte envolvida (quando as mesmas não levarem foto 3x4);
- Coletar 2 amostras de cada parte envolvida.



TOMMASI LABORATÓRIO

Instrução de Trabalho

Coleta de Amostras para exames de DNA

Código:
ITA 005

Versão:
1.0

Página:
3 de 17

→ Células Bucais

- 1) Etiquetar os swabs antes da coleta;
 - Etiqueta deverá conter os seguintes dados:
 - Nome;
 - Especificação (Suposto Pai, Suposto Filho ou Mãe);
 - Prova ou Contra-Prova.

Exemplo etiqueta do suposto pai:

Pato Donald	Pato Donald
Suposto pai	Suposto pai
Prova	Contra-Prova

- 2) Na hora de coletar conferir se as etiquetas são realmente da parte envolvida que será coletada e pedir para que a mesma também confira as etiquetas (nome e especificações corretos);
- 3) Em seguida, esfregar o 1º swab estéril no interior de uma das bochechas por aproximadamente 2 minutos (girando o swab);
- 4) Repetir o procedimento com o 2º swab estéril com o outro lado da bochecha;
- 5) Ao término da coleta, mostrar todas as amostras (etiquetas) a todas as partes envolvidas, certificando junto com elas que foram coletadas duas amostras de cada parte.

→ Sangue Total

- 1) Etiquetar os tubos de sangue total em EDTA antes da coleta;
 - Etiqueta deverá conter os seguintes dados:
 - Nome;
 - Especificação (Suposto Pai, Suposto Filho ou Mãe);
 - Prova ou Contra-Prova.

Exemplo etiqueta do suposto pai:

Pato Donald	Pato Donald
Suposto pai	Suposto pai
Prova	Prova

- 2) Na hora de coletar conferir se as etiquetas são realmente da parte envolvida que será coletada e pedir para que a mesma também confira as etiquetas (nome e especificações corretos);
 - 3) Em seguida, coletar 2 tubos de sangue total em EDTA com no mínimo 500µl de sangue em cada um deles;
 - 4) Ao término da coleta, mostrar todas as amostras (etiquetas) a todas as partes envolvidas, certificando junto com elas que foram coletadas duas amostras de cada parte.
- O responsável pela coleta deverá assinar o nome legível na **Ficha de Cadastro** no campo "Responsável pela Coleta";
 - O perito responsável deverá assinar o nome legível na **Ficha de Cadastro** no campo "Perito Responsável";
 - O perito responsável deverá ficar, em todos os momentos, em posse dos materiais coletados. Este ficará responsável pelas amostras até que estas cheguem ao Setor de Biologia Molecular.

 TOMMASI LABORATÓRIO	TOMMASI LABORATÓRIO Instrução de Trabalho Coleta de Amostras para exames de DNA	Código: ITA 005
		Versão: 1.0
		Página: 4 de 17

6.2. Teste DUO = Suposto Pai (SP) x Suposto Filho(a) (SF):

- Se o Suposto Filho(a) for MENOR DE IDADE este teste só será realizado quando:

- O Suposto Filho POSSUIR o nome do Suposto Pai em sua Certidão de Nascimento (REGISTRADO no nome do Suposto Pai), nesse caso, NÃO precisa da autorização da mãe, pois o Suposto Pai é o responsável legal;

OU

- O Suposto Filho NÃO POSSUIR o nome do Suposto Pai em sua Certidão de Nascimento (NÃO REGISTRADO no nome do Suposto Pai), nesse caso, o Responsável Legal deverá assinar o **Termo de Autorização para Realização de Exame** autorizando a coleta do material biológico (Sangue total ou Células bucais) do suposto filho(a);

Suposto Filho(a) menor de idade REGISTRADO no nome do Suposto Pai:

→ Documentos necessários:

- Cópia e Original da Carteira de Identidade (ID) e CPF ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
- Cópia e Original da Certidão de Nascimento para o suposto filho se o mesmo não possuir ID.

- 1) Comparar e conferir se as cópias dos documentos estão iguais aos documentos originais;
- 2) Reter as cópias dos documentos.

Ficha de Cadastro:

- Preencher corretamente a **Ficha de Cadastro** com letra legível;
- Suposto Pai (Responsável Legal) assinará as duas **Fichas de Cadastro**;
- Deverá ser preenchido corretamente e com letra legível o **Termo de Autorização para Realização de Exame** e assinado pelo Suposto Pai (Responsável Legal), onde o mesmo autorizará a coleta do material biológico (Sangue total ou Células bucais) do suposto filho(a);
- Conferir as assinaturas das partes envolvidas na **Ficha de Cadastro** e no **Termo de Autorização para Realização de Exame**, pois a mesma deverá ser igual a do documento apresentado;
- O Responsável pelo preenchimento da ficha deverá assinar o nome legível na **Ficha de Cadastro** no campo “Responsável pelo preenchimento dos dados”.

OBS: Todas as partes (Suposto Pai, Suposto Filho(a) e Mãe) quando MENORES DE IDADE deverão ter Ficha de Cadastro e Autorização para Realização de Exame assinada pelo respectivo **Responsável Legal** que deverá estar presente na hora da coleta com cópia e original dos documentos necessários (ID e CPF ou CNH).

Solicitação de Entrega de Laudo a outra Pessoa

Será preenchida quando as partes envolvidas solicitarem que o laudo seja entregue a outra pessoa:

- Preencher corretamente o **Termo de Solicitação de Entrega de Laudo a outra Pessoa** com letra legível;

 TOMMASI LABORATÓRIO	TOMMASI LABORATÓRIO Instrução de Trabalho Coleta de Amostras para exames de DNA	Código: ITA 005
		Versão: 1.0
		Página: 5 de 17

- Parte envolvida que solicitar a entrega do laudo a outra pessoa deverá assinar o **Termo de Solicitação de Entrega de Laudo a outra Pessoa**;
- Conferir a assinatura do **Termo de Solicitação de Entrega de Laudo a outra Pessoa**, pois a mesma deverá ser igual a do documento apresentado.

Coleta:

- Explicar o teste para as partes envolvidas;
- Tirar uma foto individual de cada parte envolvida (quando as mesmas não levarem foto 3x4);
- Coletar 2 amostras de cada parte envolvida.

→ *Células Bucais*

- Etiquetar os swabs antes da coleta;
 - Etiqueta deverá conter os seguintes dados:
 - Nome;
 - Especificação (Suposto Pai, Suposto Filho ou Mãe);
 - Prova ou Contra-Prova.

Exemplo etiqueta do suposto pai:

Pato Donald Suposto pai Prova	Pato Donald Suposto pai Contra-Prova
--	---

- Na hora de coletar conferir se as etiquetas são realmente da parte envolvida que será coletada e pedir para que a mesma também confira as etiquetas (nome e especificações corretos);
- Em seguida, esfregar o 1º swab estéril no interior de uma das bochechas por aproximadamente 2 minutos (girando o swab);
- Repetir o procedimento com o 2º swab estéril com o outro lado da bochecha;
- Ao término da coleta, mostrar todas as amostras (etiquetas) a todas as partes envolvidas, certificando junto com elas que foram coletadas duas amostras de cada parte.

→ *Sangue Total*

- Etiquetar os tubos de sangue total em EDTA antes da coleta;
 - Etiqueta deverá conter os seguintes dados:
 - Nome;
 - Especificação (Suposto Pai, Suposto Filho ou Mãe);
 - Prova ou Contra-Prova.

Exemplo etiqueta do suposto pai:

Pato Donald Suposto pai Prova	Pato Donald Suposto pai Contra-Prova
--	---

- Na hora de coletar conferir se as etiquetas são realmente da parte envolvida que será coletada e pedir para que a mesma também confira as etiquetas (nome e especificações corretos);
- Em seguida, coletar 2 tubos de sangue total em EDTA com no mínimo 500µl de sangue em cada um deles;

 TOMMASI LABORATÓRIO	TOMMASI LABORATÓRIO Instrução de Trabalho Coleta de Amostras para exames de DNA	Código: ITA 005
		Versão: 1.0
		Página: 6 de 17

- 4) Ao termo da coleta, mostrar todas as amostras (etiquetas) a todas as partes envolvidas, certificando junto com elas que foram coletadas duas amostras de cada parte.
- O responsável pela coleta deverá assinar o nome legível na **Ficha de Cadastro** no campo "Responsável pela Coleta";
 - O perito responsável deverá assinar o nome legível na **Ficha de Cadastro** no campo "Perito Responsável";
 - O perito responsável deverá ficar, em todos os momentos, em posse dos materiais coletados. Este ficará responsável pelas amostras até que estas cheguem ao Setor de Biologia Molecular.

Suposto Filho(a) menor de idade NÃO REGISTRADO no nome do Suposto Pai:

- O responsável legal pelo suposto filho(a) menor de idade deverá estar presente na hora da coleta, com cópia e original dos documentos necessários (ID e CPF ou CNH), para assinar o **Termo de Autorização para Realização de Exame** e dessa forma autorizar a coleta do material biológico (Sangue total ou Células bucais) do suposto filho(a);
- OU**
- O Responsável legal pelo suposto filho(a) menor de idade, quando não presente, deverá assinar o **Termo de Autorização para Realização de Exame** e reconhecer firma das assinaturas, autorizando assim a coleta do material biológico (Sangue total ou Células bucais) do suposto filho(a). Deverá também tirar uma cópia autenticada dos documentos necessários (ID e CPF ou CNH).

→ Documentos necessários:

- Cópia e Original da Carteira de Identidade (ID) e CPF ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
- Cópia e Original da Certidão de Nascimento para o suposto filho se o mesmo não tiver ID;
- Cópia e Original da Certidão de Nascido Vivo para o suposto filho(a) se o mesmo for recém nascido e não possuir certidão de nascimento.

- 1) Comparar e conferir se as cópias dos documentos estão iguais aos documentos originais;
- 2) Reter as cópias dos documentos.

Ficha de Cadastro:

- Preencher corretamente a **Ficha de Cadastro** com letra legível;
- Cada parte envolvida deverá assinar a sua respectiva **Ficha de Cadastro**, sendo que a **Ficha de Cadastro** do suposto filho(a) menor de idade deverá ser assinada pelo seu responsável legal, se este estiver presente;
- Deverá ser preenchido corretamente e com letra legível o **Termo de Autorização para Realização de Exame** e assinado pelo responsável legal, onde o mesmo autorizará a coleta do material biológico (Sangue total ou Células bucais) do suposto filho(a);
- Conferir as assinaturas das partes envolvidas na **Ficha de Cadastro** e **Termo de Autorização para Realização de Exame**, pois a mesma deverá ser igual a do documento apresentado;
- O Responsável pelo preenchimento da ficha deverá assinar o nome legível na **Ficha de Cadastro** no campo "Responsável pelo preenchimento dos dados".



TOMMASI LABORATÓRIO

Instrução de Trabalho

Coleta de Amostras para exames de DNA

Código:
ITA 005

Versão:
1.0

Página:
7 de 17

OBS: Todas as partes (Suposto Pai, Suposto Filho(a) e Mãe) quando MENORES DE IDADE deverão ter Ficha de Cadastro e Autorização para Realização de Exame assinada pelo respectivo Responsável Legal que deverá estar presente na hora da coleta com cópia e original dos documentos necessários (ID e CPF ou CNH).

Solicitação de Entrega de Laudo a outra Pessoa

Será preenchida quando as partes envolvidas solicitarem que o laudo seja entregue a outra pessoa:

- 1) Preencher corretamente o **Termo de Solicitação de Entrega de Laudo a outra Pessoa** com letra legível;
- 2) Parte envolvida que solicitar a entrega do laudo a outra pessoa deverá assinar o **Termo de Solicitação de Entrega de Laudo a outra Pessoa**;
- 3) Conferir a assinatura do **Termo de Solicitação de Entrega de Laudo a outra Pessoa**, *pois a mesma deverá ser igual a do documento apresentado.*

Coleta:

- Explicar o teste para as partes envolvidas;
- Tirar uma foto individual de cada parte envolvida (quando as mesmas não levarem foto 3x4);
- Coletar 2 amostras de cada parte envolvida.

→ Células Bucais

- 1) Etiquetar os swabs antes da coleta:
 - Etiqueta deverá conter os seguintes dados:
 - Nome;
 - Especificação (Suposto Pai, Suposto Filho ou Mãe);
 - Prova ou Contra-Prova.

Exemplo etiqueta do suposto pai:

Pato Donald Suposto pai Prova	Pato Donald Suposto pai Contra-Prova
-------------------------------------	--

- 2) Na hora de coletar conferir se as etiquetas são realmente da parte envolvida que será coletada e pedir para que a mesma também confira as etiquetas (nome e especificações corretos);
- 3) Em seguida, esfregar o 1º swab estéril no interior de uma das bochechas por aproximadamente 2 minutos (girando o swab);
- 4) Repetir o procedimento com o 2º swab estéril com o outro lado da bochecha;
- 5) Ao término da coleta, mostrar todas as amostras (etiquetas) a todas as partes envolvidas, certificando junto com elas que foram coletadas duas amostras de cada parte.

→ Sangue Total

- 1) Etiquetar os tubos de sangue total em EDTA antes da coleta:
 - Etiqueta deverá conter os seguintes dados:
 - Nome;
 - Especificação (Suposto Pai, Suposto Filho ou Mãe);
 - Prova ou Contra-Prova.



TOMMASI LABORATÓRIO

Instrução de Trabalho

Coleta de Amostras para exames de DNA

Código:
ITA 005

Versão:
1.0

Página:
8 de 17

Exemplo etiqueta do suposto pai:

Pato Donald Suposto pai Prova	Pato Donald Suposto pai Contra-Prova
-------------------------------------	--

- 2) Na hora de coletar conferir se as etiquetas são realmente da parte envolvida que será coletada e pedir para que a mesma também confira as etiquetas (nome e especificações corretos);
- 3) Em seguida, coletar 2 tubos de sangue total em EDTA com no mínimo 500µl de sangue em cada um deles;
- 4) Ao termino da coleta, mostrar todas as amostras (etiquetas) a todas as partes envolvidas, certificando junto com elas que foram coletadas duas amostras de cada parte.
 - O responsável pela coleta deverá assinar o nome legível na **Ficha de Cadastro** no campo “Responsável pela Coleta”;
 - O perito responsável deverá assinar o nome legível na **Ficha de Cadastro** no campo “Perito Responsável”;
 - O perito responsável deverá ficar, em todos os momentos, em posse dos materiais coletados. Este ficará responsável pelas amostras até que estas cheguem ao Setor de Biologia Molecular.

Teste de Suposto Pai Falecido:

Documentos Necessários:

- Cópia e Original da Carteira de Identidade (ID) e CPF ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
- Cópia e Original da Certidão de Nascimento para o suposto filho(a) se o mesmo não tiver ID ou CNH;
- Cópia e Original da Certidão de Nascido Vivo para o suposto filho(a) se o mesmo for recém nascido e não possuir certidão de nascimento;
- Cópia e Original da Certidão de Óbito do Suposto Pai Falecido.

- 1) Comparar e conferir se as cópias dos documentos estão iguais aos documentos originais;
- 2) Reter as cópias dos documentos.

Ficha de Cadastro:

- 1) Preencher corretamente a **Ficha de Cadastro** com letra legível;
- 2) Cada parte envolvida deverá assinar a sua respectiva **Ficha de Cadastro**;
- 3) Conferir as assinaturas das partes envolvidas na **Ficha de Cadastro**, *pois a mesma deverá ser igual a do documento apresentado*;
- 4) Responsável pelo preenchimento da ficha deverá assinar o nome legível na **Ficha de Cadastro** no campo “Responsável pelo preenchimento dos dados”.

OBS: Todas as partes (Suposto Pai, Suposto Filho(a) e Mãe) quando MENORES DE IDADE deverão ter Ficha de Cadastro e Autorização para Realização de Exame assinada pelo respectivo Responsável Legal que deverá estar presente na hora da coleta com cópia e original dos documentos necessários (ID e CPF ou CNH).



TOMMASI LABORATÓRIO

Instrução de Trabalho

Coleta de Amostras para exames de DNA

Código:
ITA 005

Versão:
1.0

Página:
9 de 17

Solicitação de Entrega de Laudo a outra Pessoa

Será preenchida quando as partes envolvidas solicitarem que o laudo seja entregue a outra pessoa:

- 4) Preencher corretamente o **Termo de Solicitação de Entrega de Laudo a outra Pessoa** com letra legível;
- 5) Parte envolvida que solicitar a entrega do laudo a outra pessoa deverá assinar o **Termo de Solicitação de Entrega de Laudo a outra Pessoa**;
- 6) Conferir a assinatura do **Termo de Solicitação de Entrega de Laudo a outra Pessoa**, *pois a mesma deverá ser igual a do documento apresentado.*

Coleta:

- Explicar o teste para as partes envolvidas;
- Tirar uma foto individual de cada parte envolvida (quando as mesmas não levarem foto 3x4);
- Coletar 2 amostras de cada parte envolvida.

→ Células Bucais

- 1) Etiquetar os swabs antes da coleta:
 - Etiqueta deverá conter os seguintes dados:
 - Nome;
 - Especificação (Pai do Suposto Pai Falecido, Mãe do Suposto Pai Falecido, Irmão(a) do Suposto Pai Falecido, Filho(a) do Suposto Pai Falecido, Suposto Filho ou Mãe);
 - Prova ou Contra-Prova.

Exemplo etiqueta do pai do suposto pai falecido:

Pato Donald Pai do Suposto Pai Falecido Prova	Pato Donald Pai do Suposto Pai Falecido Contra-Prova
---	--

- 2) Na hora de coletar conferir se as etiquetas são realmente da parte envolvida que será coletada e pedir para que a mesma também confira as etiquetas (nome e especificações corretos);
- 3) Em seguida, esfregar o 1º swab estéril no interior de uma das bochechas por aproximadamente 2 minutos (girando o swab);
- 4) Repetir o procedimento com o 2º swab estéril com o outro lado da bochecha;
- 5) Ao término da coleta, mostrar todas as amostras (etiquetas) a todas as partes envolvidas, certificando junto com elas que foram coletadas duas amostras de cada parte.

→ Sangue Total

- 1) Etiquetar os tubos de sangue total em EDTA antes da coleta:
 - Etiqueta deverá conter os seguintes dados:
 - Nome;
 - Especificação (Suposto Pai, Suposto Filho ou Mãe);
 - Prova ou Contra-Prova.

Exemplo etiqueta do suposto pai:

Pato Donald Suposto pai Prova	Pato Donald Suposto pai Contra-Prova
-------------------------------------	--

 TOMMASI LABORATORIO	<h1 style="text-align: center;">TOMMASI LABORATÓRIO</h1> <h2 style="text-align: center;">Instrução de Trabalho</h2> <h3 style="text-align: center;">Coleta de Amostras para exames de DNA</h3>	Código: ITA 005 Versão: 1.0 Página: 10 de 17
--	---	--

- 2) Na hora de coletar conferir se as etiquetas são realmente da parte envolvida que será coletada e pedir para que a mesma também confira as etiquetas (nome e especificações corretos);
 - 3) Em seguida, coletar 2 tubos de sangue total em EDTA com no mínimo 500µl de sangue em cada um deles;
 - 4) Ao termino da coleta, mostrar todas as amostras (etiquetas) a todas as partes envolvidas, certificando junto com elas que foram coletadas duas amostras de cada parte.
- O responsável pela coleta deverá assinar o nome legível na **Ficha de Cadastro** no campo "Responsável pela Coleta";
 - O perito responsável deverá assinar o nome legível na **Ficha de Cadastro** no campo "Perito Responsável";
 - O perito responsável deverá ficar, em todos os momentos, em posse dos materiais coletados. Este ficará responsável pelas amostras até que estas cheguem ao Setor de Biologia Molecular.

Teste JURÍDICO:

Documentos Necessários:

- Cópia e Original da Carteira de Identidade (ID) e CPF ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
- Cópia e Original da Certidão de Nascimento para o suposto filho(a) se o mesmo não tiver ID ou CNH;
- Cópia e Original da Certidão de Nascido Vivo para o suposto filho(a) se o mesmo for recém nascido e não possuir certidão de nascimento;
- Cópia e Original do **Documento Judicial**, onde o Juiz solicita a realização do teste.

- ❖ No **Documento Judicial** deve conter:
- Informações sobre a realização do teste (data, local e hora);
 - Nome das partes que irão realizar o teste;
 - Número do Processo;
 - Nome da Vara de Família ou Comarca.

- 1) Conferir todos os dados apresentados no **Documento Judicial** com os documentos das partes envolvidas;
- 2) Comparar e conferir se as cópias dos documentos estão iguais aos documentos originais;
- 3) Reter as cópias dos documentos.

Ficha de Cadastro:

- 1) Preencher corretamente a **Ficha de Cadastro** com letra legível;
- 2) Cada parte envolvida deverá assinar a sua respectiva **Ficha de Cadastro**;
- 3) Conferir as assinaturas das partes envolvidas na **Ficha de Cadastro**, *pois a mesma deverá ser igual a do documento apresentado*;
- 4) Responsável pelo preenchimento da ficha deverá assinar o nome legível na **Ficha de Cadastro** no campo "Responsável pelo preenchimento dos dados".

OBS: Todas as partes (Suposto Pai, Suposto Filho(a) e Mãe) quando MENORES DE IDADE deverão ter Ficha de Cadastro e Autorização para Realização de Exame assinada pelo respectivo Responsável Legal que deverá estar presente na hora da coleta com cópia e original dos documentos necessários (ID e CPF ou CNH).



TOMMASI LABORATÓRIO

Instrução de Trabalho

Coleta de Amostras para exames de DNA

Código:
ITA 005

Versão:
1.0

Página:
11 de 17

Solicitação de Entrega de Laudo a outra Pessoa

Será preenchida quando as partes envolvidas solicitarem que o laudo seja entregue a outra pessoa:

- 1) Preencher corretamente o **Termo de Solicitação de Entrega de Laudo a outra Pessoa** com letra legível;
- 2) Parte envolvida que solicitar a entrega do laudo a outra pessoa deverá assinar o **Termo de Solicitação de Entrega de Laudo a outra Pessoa**;
- 3) Conferir a assinatura do **Termo de Solicitação de Entrega de Laudo a outra Pessoa**, pois a mesma deverá ser igual a do documento apresentado.

Coleta:

- Explicar o teste para as partes envolvidas;
- Tirar uma foto individual de cada parte envolvida (quando as mesmas não levarem foto 3x4);
- Coletar 2 amostras de cada parte envolvida.

→ Células Bucais

- 1) Etiquetar os swabs antes da coleta:
 - Etiqueta deverá conter os seguintes dados:
 - Nome;
 - Especificação (Suposto Pai, Suposto Filho ou Mãe);
 - Prova ou Contra-Prova.

Exemplo etiqueta do suposto pai:

Pato Donald Suposto pai Prova	Pato Donald Suposto pai Contra-Prova
-------------------------------------	--

- 2) Na hora de coletar conferir se as etiquetas são realmente da parte envolvida que será coletada e pedir para que a mesma também confira as etiquetas (nome e especificações corretos);
- 3) Em seguida, esfregar o 1º swab estéril no interior de uma das bochechas por aproximadamente 2 minutos (girando o swab);
- 4) Repetir o procedimento com o 2º swab estéril com o outro lado da bochecha;
- 5) Ao término da coleta, mostrar todas as amostras (etiquetas) a todas as partes envolvidas, certificando junto com elas que foram coletadas duas amostras de cada parte.

→ Sangue Total

- 1) Etiquetar os tubos de sangue total em EDTA antes da coleta:
 - Etiqueta deverá conter os seguintes dados:
 - Nome;
 - Especificação (Suposto Pai, Suposto Filho ou Mãe);
 - Prova ou Contra-Prova.

Exemplo etiqueta do suposto pai:

Pato Donald Suposto pai Prova	Pato Donald Suposto pai Contra-Prova
-------------------------------------	--

 TOMMASI LABORATORIO	TOMMASI LABORATÓRIO Instrução de Trabalho Coleta de Amostras para exames de DNA	Código: ITA 005
		Versão: 1.0
		Página: 12 de 17

- 2) Na hora de coletar conferir se as etiquetas são realmente da parte envolvida que será coletada e pedir para que a mesma também confira as etiquetas (nome e especificações corretos);
 - 3) Em seguida, coletar 2 tubos de sangue total em EDTA com no mínimo 500µl de sangue em cada um deles;
 - 4) Ao termo da coleta, mostrar todas as amostras (etiquetas) a todas as partes envolvidas, certificando junto com elas que foram coletadas duas amostras de cada parte.
- O responsável pela coleta deverá assinar o nome legível na **Ficha de Cadastro** no campo "Responsável pela Coleta";
 - O perito responsável deverá assinar o nome legível na **Ficha de Cadastro** no campo "Perito Responsável";
 - O perito responsável deverá ficar, em todos os momentos, em posse dos materiais coletados. Este ficará responsável pelas amostras até que estas cheguem ao Setor de Biologia Molecular.

Coletas com as partes separadas:

- Deverá preencher corretamente e com letra legível o **Termo de Coleta Separada**;
- Cada parte envolvida deverá assinar o seu respectivo **Termo de Coleta Separada**;
- Conferir as assinaturas das partes envolvidas no **Termo de Coleta Separada**, *pois a mesma deverá ser igual a do documento apresentado*;
- O resto do procedimento (**Documentos Necessários, Ficha de Cadastro, Solicitação de Entrega a outra Pessoa e Coleta**) será realizado da mesma forma que o teste com todas as partes presentes (Suposto pai, Suposto filho(a) e Mãe ou Suposto pai e Suposto filho(a)).


OBS: Todas as partes (Suposto Pai, Suposto Filho(a) e Mãe) quando MENORES DE IDADE deverão ter Ficha de Cadastro e Autorização para Realização de Exame assinada pelo respectivo Responsável Legal que deverá estar presente na hora da coleta com cópia e original dos documentos necessários (ID e CPF ou CNH).

7. CONTROLE DE REGISTROS:

Identificação do registro	Responsável pela coleta	Responsável pelo acesso	Local do arquivamento	Forma de armazenamento	Tempo de guarda
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

8. ANEXOS:

- Anexo 1 - Ficha de cadastro
- Anexo 2 - Termo de ciência de coletas separadas
- Anexo 3 - Autorização para realização de exame
- Anexo 4 - Solicitação de entrega de laudo a outra pessoa

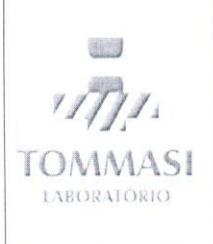

TOMMASI LABORATÓRIO
Instrução de Trabalho
Coleta de Amostras para exames
de DNA

Código:
ITA 005
Versão:
1.0
Página:
13 de 17

Anexo 1 - Ficha de cadastro

FICHA DE CADASTRO PARA COLETA DE EXAME DE DNA

Data: ____ / ____ / ____

Tipo de Teste: () Particular () Jurídico

N.º do Processo: _____ Vara: _____

- () Mãe () Suposto(a) Filho(a) () Filho Legítimo do SP Falecido
() Pai do SP Falecido () Mãe do SP Falecido () Irmão Legítimo do SP Falecido
() Suposto Pai () Mãe do Filho Legítimo

Nome: _____

CPF _____ RG: _____ UF: _____

Data de Nascimento: ____ / ____ / ____

Endereço: _____

Bairro: _____ Cidade: _____ UF: _____

CEP: _____ Tel.(____) _____ Cel.(____)

Nome do Suposto Pai Falecido: _____

Entregar laudo em: _____

Quem buscará o laudo? _____ RG: _____

Material Coletado: () Sangue Total () Células Bucais

Realizou alguma transfusão de sangue nos últimos seis meses: () sim () não Quando? _____

Realizou transplante de medula óssea: () sim () não Quando? _____

Possui irmão(a) gêmeo univitelino: () sim () não

Certifico que sou o abaixo assinado e tive meu material biológico (sangue total ou células bucais) coletado voluntariamente no Tommasi Laboratório. Certifico também que testemunhei a identificação deste material coletado com o nome correto, assim como o preenchimento dos meus dados de forma correta. Eu estou ciente de que o laudo de paternidade só será entregue às partes, mediante a apresentação do documento com foto original ou cópia autenticada.

Assinatura

 TOMMASI LABORATÓRIO	TOMMASI LABORATÓRIO Instrução de Trabalho Coleta de Amostras para exames de DNA	Código: ITA 005
		Versão: 1.0
		Página: 14 de 17


Dados do Tommasi Laboratório:

Certificamos que nós, os abaixo assinados, verificamos a identidade do indivíduo acima checando todos os documentos apresentados e a fotografia, e testemunhando a coleta do seu material biológico (sangue total ou células bucais). Certificamos também que qualquer problema relacionado a dados, documentos do cliente e a coleta é de total responsabilidade dos responsáveis pelo preenchimento dos dados, responsáveis pela coleta e perito responsável.

Responsável pelo preenchimento dos dados
(Nome Legível)

Responsável pela coleta
(Nome Legível)

Perito Responsável
(Nome Legível)

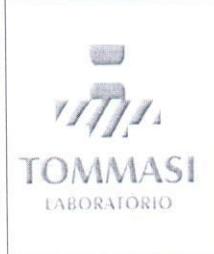

TOMMASI LABORATÓRIO
Instrução de Trabalho
Coleta de Amostras para exames
de DNA

Código:
ITA 005
Versão:
1.0
Página:
15 de 17

Anexo 2 - Termo de ciência de coletas separadas

TERMO DE CIÊNCIA DE COLETAS SEPARADAS

Eu _____, portador
(a) do documento de identidade nº _____ e CPF nº
_____ estou ciente de que preferi realizar a coleta do
material biológico, para utilização em teste de paternidade e/ou maternidade por DNA, em
momento diferente das demais partes.

Declaro-me ciente e de acordo,

Assinatura

_____, ____ de _____ de _____.



TOMMASI LABORATÓRIO
Instrução de Trabalho
Coleta de Amostras para exames
de DNA

Código:
ITA 005
Versão:
1.0
Página:
16 de 17

Anexo 3 - Autorização para realização de exame

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME

Eu _____, portador (a) _____
do documento de identidade nº _____, CPF nº _____,
responsável legal pelo(a) menor _____
autorizo a utilização de seu material genético para a realização de teste de paternidade
e/ou maternidade por DNA.

Responsável Legal

_____, _____ de _____ de _____



TOMMASI LABORATÓRIO
Instrução de Trabalho
Coleta de Amostras para exames
de DNA

Código:
ITA 005
Versão:
1.0
Página:
17 de 17

Anexo 4 - Solicitação de entrega de laudo a outra pessoa

SOLICITAÇÃO DE ENTREGA DE EXAME A OUTRA PESSOA

Eu _____, portador(a) do documento de identidade nº _____, CPF nº _____, autorizo que meu laudo de exame de paternidade e/ou maternidade seja entregue a _____, portador(a) do documento de identidade nº _____, CPF nº _____.

Assinatura

_____, _____ de _____ de _____